

Guia de Produtos Ginecologia

Guia de pesquisa rápida
para auxiliar sua busca por
informações técnicas

FERTILIDADE

Handle



BAKRI



Estimular

a contração miometrial

Pressionar

diretamente as
artérias uterinas

FERTILIDADE

Handle



BAKRI



Cateter Balão para Hemorragia Pós-parto - BAKRI

INDICAÇÃO: redução, controle temporário ou tratamento conservador da Hemorragia Pós Parto – HPP

- É mais efetivo nos casos de hemorragia primária (até 24h)
- Pode ser usado após parto cesárea ou vaginal
- O tamponamento uterino é alcançado através da criação de uma pressão intra útero de 300mmHg

OBJETIVOS:

- Estimular a contração miometrial
- Exercer pressão direta nas artérias uterinas

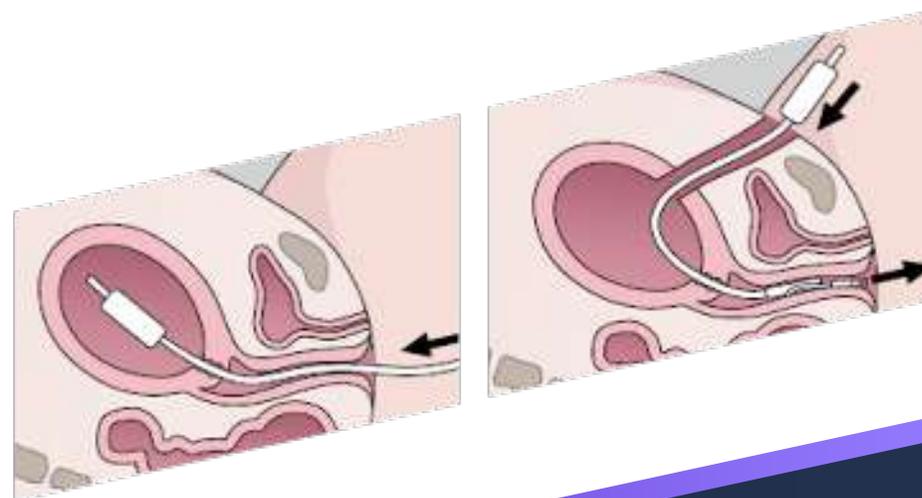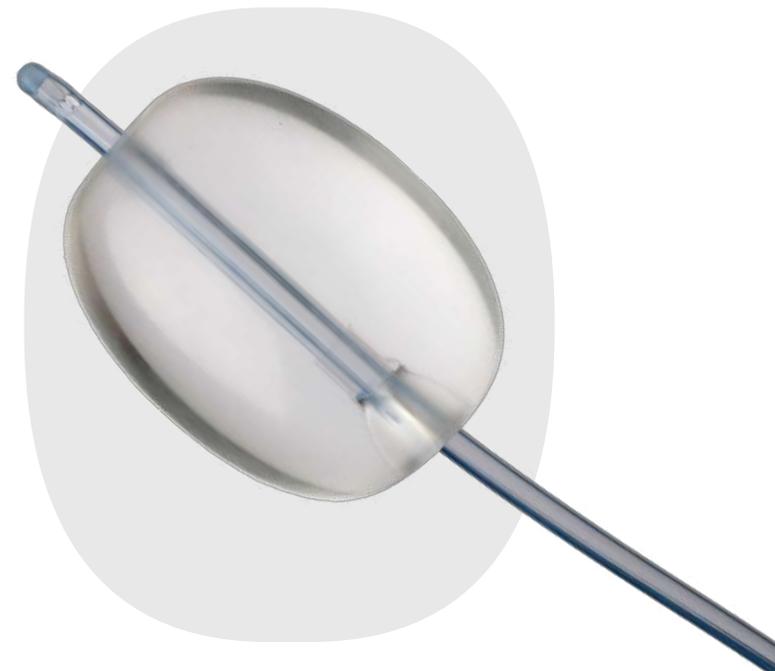



BAKRI


Cateter Balão para Hemorragia Pós-parto - BAKRI

USU:

- Pode permanecer na paciente até 24h
- Pode associar a analgesia, manter uterotônicos e antibioticoprofilaxia
- Pode ser utilizado com suturas de compressão
- Rápido e pouco invasivo
- Reduz o fluxo sanguíneo

CUIDADOS:

- NUNCA inflar com ar ou gás
- NUNCA inflar mais de 500ml
- NUNCA infundir soro frio

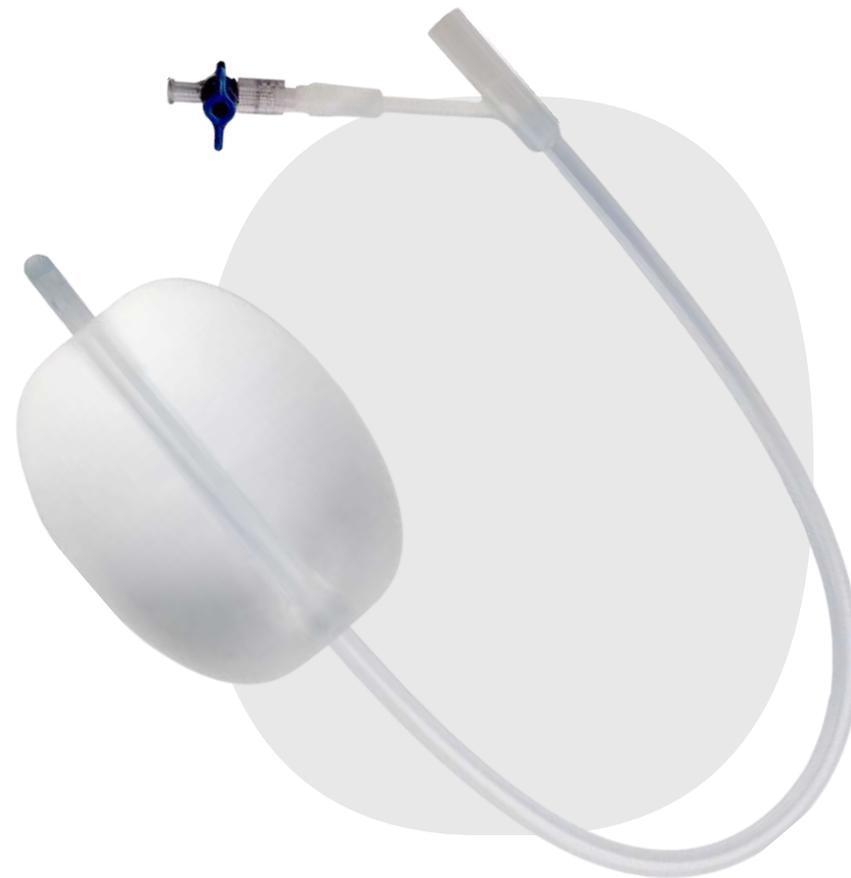



BAKRI

Cateter Balão para Hemorragia Pós-parto - BAKRI

REFERÊNCIA: J-SOSR-100500

CARACTERÍSTICAS:

- Cateter 100% em silicone
- 24Fr de diâmetro
- 54cm de comprimento
- Duplo Lúmen

VOLUME MÁX. DO BALÃO: 500ml

COMPONENTES:


- I. Cateter balão
- II. Adaptador
- III. Extensão three-way
- IV. Válvula three-way
- V. Extensão para instilação rápida para facilitar a insuflação do balão





BAKRI

Cateter Balão para Hemorragia Pós-parto - BAKRI

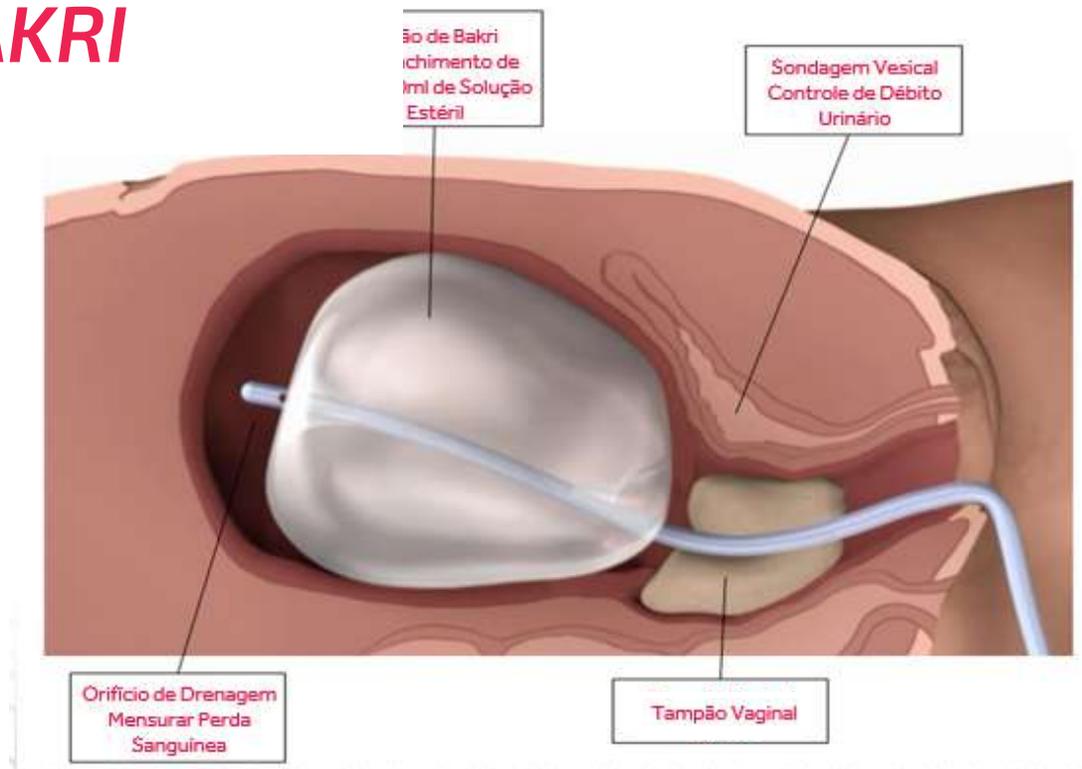



CRB



Transformar

um colo do útero
desfavorável em favorável

Pressão estável

sobre os orifícios
cervicais internos
e externos

FERTILIDADE





CRB


Cateter Balão de Dilatação Mecânica do Canal Cervical - CRB

INDICAÇÃO: dilatação mecânica do canal cervical

INTRODUÇÃO: fase de pré indução do trabalho de parto

OBJETIVOS:

- Transformar um colo de útero desfavorável em favorável
- Exerce uma pressão contínua sobre os orifícios interno e externo do colo uterino

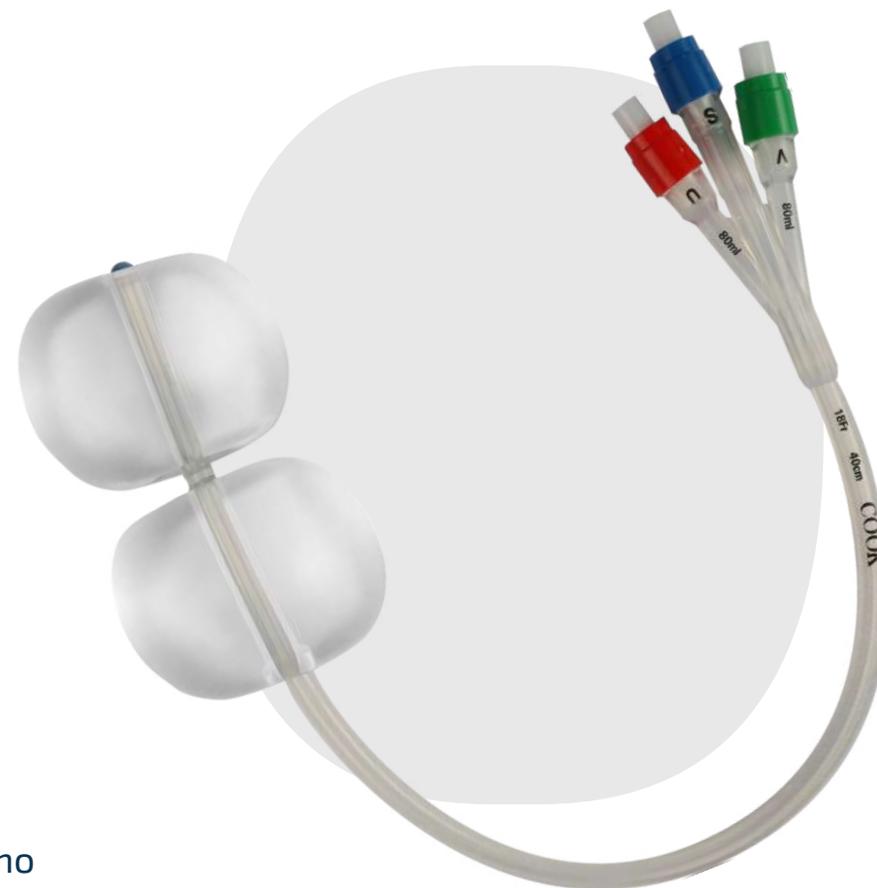



CRB


Cateter Balão de Dilatação Mecânica do Canal Cervical - CRB

USO:

- Não deve permanecer na paciente por mais de 12 horas
- Não exige tração
- Indicado quando o Índice de Bishop for igual ou menor a 6 pontos
- Sua ação é interrompida quando o dispositivo é removido

CUIDADOS:

- NUNCA insuflar com ar ou gás
- NUNCA inflar com ar ou gás
- NUNCA inflar mais de 80ml em cada balão nesse caso, o mesmo não será efetivo

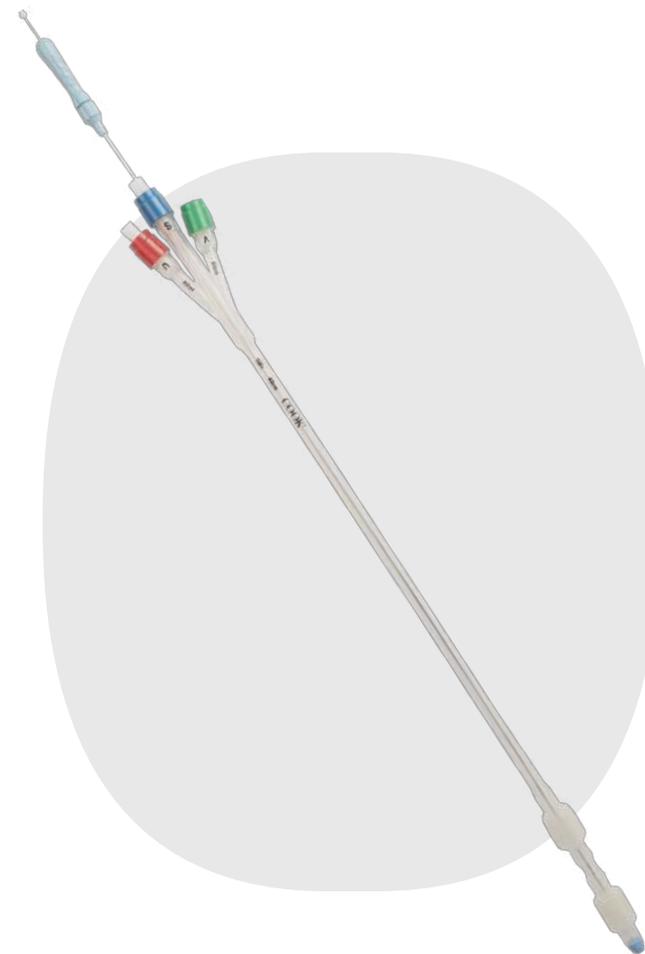



CRB

Cateter Balão de Dilatação Mecânica do Canal Cervical - CRB

REFERENCIA: J-CRBS-184000


CARACTERÍSTICAS:

- Balão duplo 100% em silicone
 - 18Fr de diâmetro
 - 40cm de comprimento
-

VOLUME MÁX. DO BALÃO: 80 ml/cada

COMPONENTES:

- I. Cateter
- II. Estilete maleável de comprimento ajustável

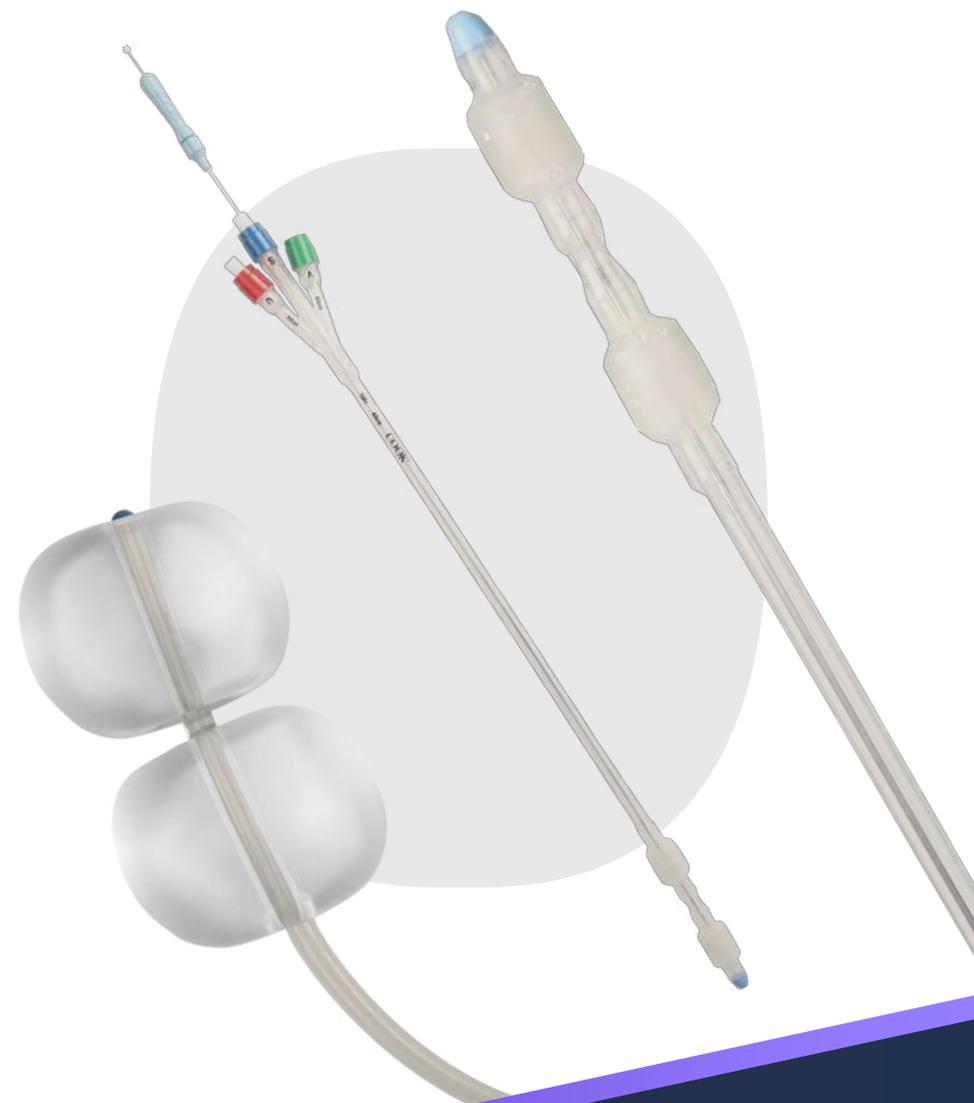



STENT



Drenar

a urina da bexiga
do feto para o saco
amniótico

FERTILIDADE

Handle




STENT

Conjunto de Stent para Bexiga Fetal - Harrison

INDICAÇÃO: Descompressão e alívio da pressão do trato urinário fetal

OBJETIVO: Drenar a urina da bexiga do feto através do stent, para o saco amniótico

USO: Pode ser utilizado durante o período da 18ª a 32ª semana gestacional

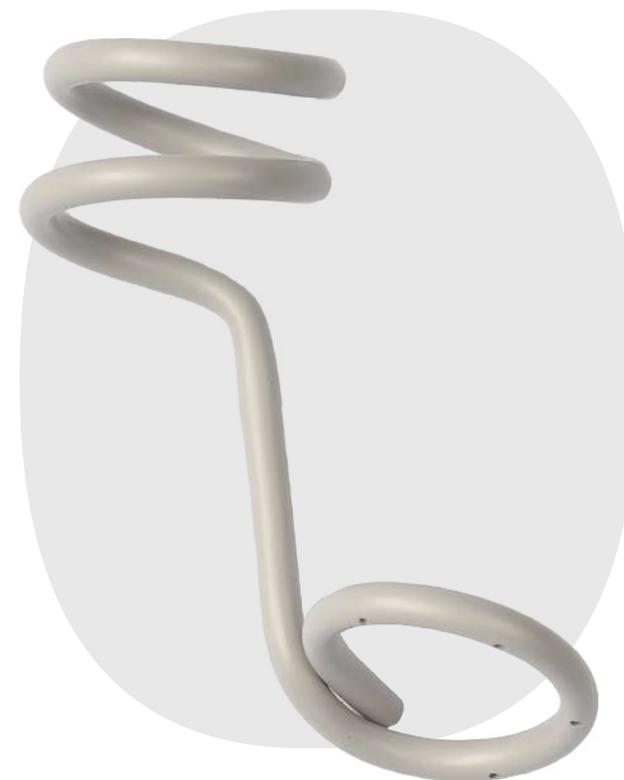



STENT

Conjunto de Stent para Bexiga Fetal - Harrison


REFERÊNCIA: J-HFBS-503540

CARACTERÍSTICAS:

- Duplo pigtail (proximal e distal, com 4 orifícios laterais cada);
 - 5.0Fr de diâmetro externo
 - Comprimento variável
 - Comprimento de 1,5 a 3,5cm entre os pigtail
-

COMPONENTES:

- I. Stent
- II. Fio guia
- III. Posicionador
- IV. Agulha

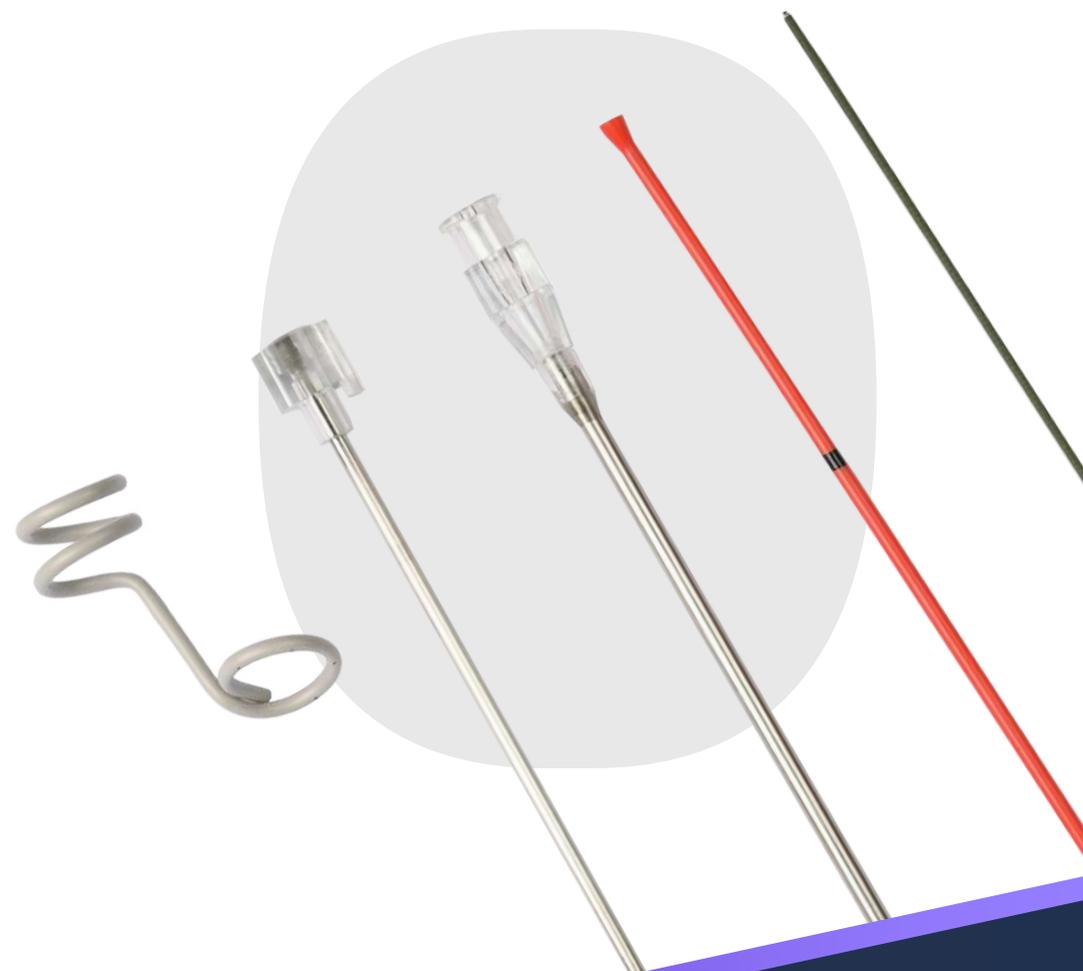



BOLSA COLETORA LAPSAC



FERTILIDADE

Handle



Bolsa Coletora Lapsac

INDICAÇÃO: é utilizada para isolar tecido durante ou antes da remoção cirúrgica.

CARACTERÍSTICAS:

- Bolsa em nylon reforçado resistente a rasgos
- Possui guia para abertura da bolsa
- Possui cordão azul para fixação
- Revestimento interno de poliuretano para evitar vazamentos





Bolsa Coletora Lapsac

REFERÊNCIA: **J-LS-050201**

Dimensão (inch): **2 x 5**

Quantidade de bolsas: **1**

Volume (ml): **50**

REFERÊNCIA: **J-LS-080500**

Dimensão (inch): **5 x 8**

Quantidade de bolsas: **1**

Volume (ml): **750**

REFERÊNCIA: **J-LS-060401**

Dimensão (inch): **4 x 6**

Quantidade de bolsas: **1**

Volume (ml): **200**

REFERÊNCIA: **J-LS-081000**

Dimensão (inch): **8 x 10**

Quantidade de bolsas: **1**

Volume (ml): **1500**



HSG



Acessar

cavidade
uterina para
Histerossonografia

Injeção

de meio de contraste
na cavidade uterina e
tubas uterinas

FERTILIDADE

Handle




HSG

Cateter HSG

FINALIDADE:

- Acessar a cavidade uterina para Histerossalpingografia
- Usado também para injeção de meio de contraste na cavidade uterina e tubas uterinas
- Possui balão que forma uma vedação no orifício cervical interno para manter a solução salina ou meio de contraste no útero

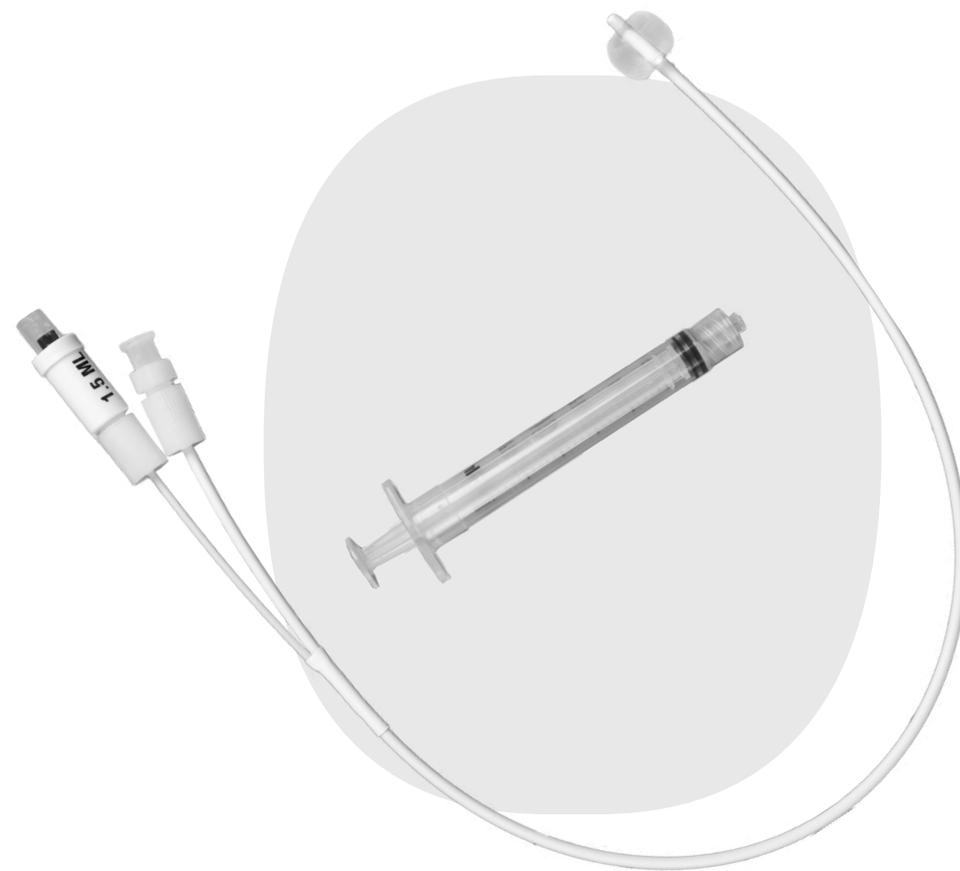



HSG

Cateter HSG

REFERÊNCIA: **J-CHSG-503000**

Diâmetro do Cateter: **5cm**

Comprimento do Catéter: **30cm**

Volume Balão: **1.0mL**

REFERÊNCIA: **J-CHSG-703000**

Diâmetro do Cateter: **7cm**

Comprimento do Catéter: **30cm**

Volume Balão: **1.5mL**

REFERÊNCIA: **J-CHSG-503001**

Diâmetro do Cateter: **5cm**

Comprimento do Catéter: **30cm**

Volume Balão: **1.0mL**

REFERÊNCIA: **J-CHSG-703001**


Diâmetro do Cateter: **7cm**

Comprimento do Catéter: **30cm**

Volume Balão: **1.5mL**



Mapa de Atuação

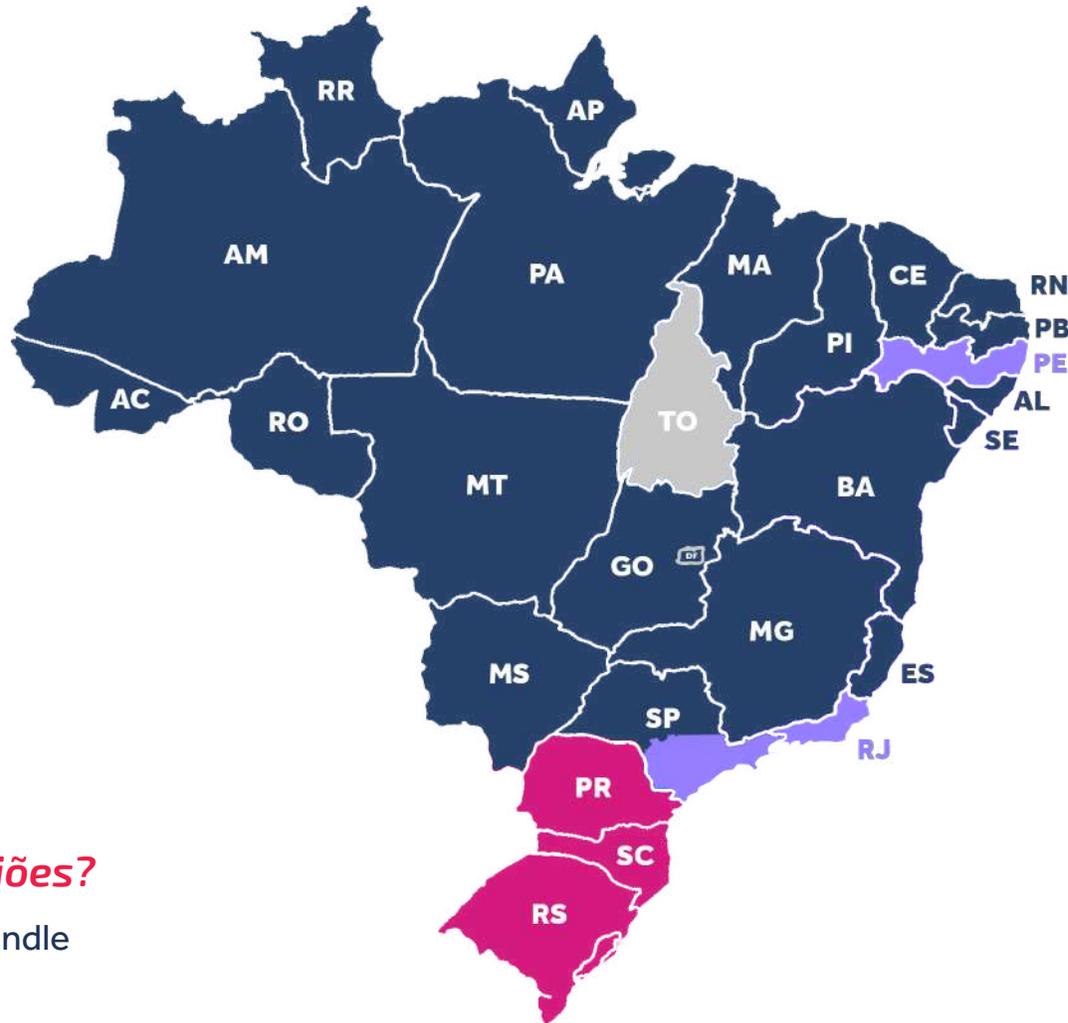

Região metropolitana de SP , Baixada Santista, Vale do Paraíba, Litoral Norte, Recife e Rio de Janeiro

Contato: Fábio Magalhães
E -mail: fabio.magalhaes@handle.com.br
Telefone: 11 97587-0391



Paraná, Santa Catarina e Porto Alegre

Contato: Tainá Lopes
E-mail: taina@handle.com.br
Telefone: 51 9850-7004



Norte, Nordeste (exceto Pernambuco), GO, MT, MS, DF, MG, ES, interior de SP

Contato: Camila Santos
E-mail: camilasantos@handle.com.br
Telefone: 19 99770-6321

Fora dessas regiões?

Fale direto com a Handle

handle.com.br
+55 16 3456 1400

*Quaisquer dúvidas
entre em contato
com a gente!*

handle.com.br

+55 16 3456 1400

